

Dispensadores-Dosificadores de Volumen variable para Botellas.(frascos). Modelos “Zippette”. **Marca Comecta.** (Certificado de Calibración según nº de serie).

De gran precisión y repetitividad y diseñados para una dispensación segura.

Válvula de seguridad antigoteo útil frente a una dispensación accidental.

Válvula de recirculación, evita la fuga accidental de líquido entre dispensaciones.

Cabezal giratorio a 360° para una cómoda manipulación.

Pistón en PTFE de suave acción fácilmente desmontable para su limpieza e integrado en cilindro de vidrio borosilicato y protegido por una manga en PP transparente, que permite la inspección del líquido antes de su dispensación.

Cánula de descarga en FEP acodada a 90° para una dispensación segura en matraces de cuello estrecho. Tubo de aspiración en PTFE. Totalmente autoclavables a 121 °C, 2 bar, excepto cabezal digital.

Todas las partes en contacto con el líquido son químicamente resistentes. No obstante no son aptos para líquidos que no sean compatibles con PTFE, PVDE, FEP, vidrio borosilicato, cerámica de aluminio platino-iridio, ni para la dispensación de ácido hidrofúrico, ni líquidos con partículas sólidas.

Dispensación libre de burbujas. Fijación directa sobre frascos roscables GL30 y se suministran con 3 adaptadores GL38, GL40 y GL45.

Los frascos no están incluidos (ver accesorios).

Modelos Zippette 2,5, 5, 10, 30 y 50

Selección del volumen por fijación del cursor en la escala graduada con tope de bloqueo adicional. Aspiración y dispensación por desplazamiento manual ascendente y descendente del pistón.

Calibración por un dispositivo superior de ajuste fino que le permite una mejor reproducibilidad en ensayos repetitivos en medios de diferentes viscosidades.


Modelos Zippette-Digital Estándar y Automatic

Selección del volumen por visualización digital mediante la rotación del botón superior. En mod. Estándar aspiración por desplazamiento manual ascendente del pistón. En modelo Automatic aspiración de llenado automático por acción de un muelle de retorno que presiona el pistón hacia arriba. La Dispensación en ambos modelos, por desplazamiento manual descendente del pistón.

Calibración vía panel digital apta para los requerimientos GLP/ISO, o diferentes

viscosidades. Resolución del display de 100 µl.

Auto-desconexión sin pérdida de dato tras 3' de inoperatividad.

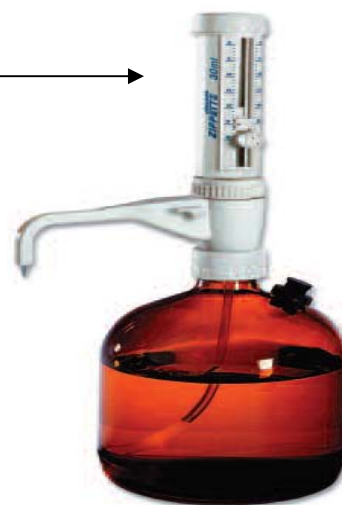

Codigo	Modelo	Capacidad ml.	Incrementos ml.	Exactitud %	Precisión % CV.
0263000	Zippette 2,5	0,01 2,5	0,05	± 0,3	<0,1
0263001	Zippette 5	0,1 5	0,1	± 0,3	<0,1
0263002	Zippette 10	0,2 10	0,2	± 0,3	<0,1
0263003	Zippette 30	1 30	1	± 0,3	<0,1
0263004	Zippette 50	1 50	1	± 0,3	<0,1
0263028	Z.Digital St	0 30	0,2	± 0,3	<0,1
0263029	Z.Digital Aut	0 30	0,2	± 0,3	<0,1

Frasco en vidrio Borosilicato color Ambar Absorbente hasta 500nm. Vol de 1,4 Litros, y con orificio de llenado optativo lateral **Cod:0262086.**

Frasco en vidrio Borosilicato color Ambar Absorbente hasta 500nm, Vol de 2,5 Litros, Y con orificio de llenado optativo lateral. **Cod:0262103.**
(Diseño antivuelco de gran estabilidad).

Dispositivo de Ajuste Fino:



Dispensadores-Dosificadores de Volumen variable para Botellas.(frascos). Modelos “Accupenser Junior”. **Marca Nichiryo.**

Fácilmente desmontable. Las distintas partes de la botella se pueden desmontar y cambiar fácilmente. Botellas están incluidas en el modelo **Químicamente resistente.** Las partes que tocan el líquido y el dispensador son químicamente resistentes. Para ácidos fuertes o disolventes orgánicos, usar el tubo de PTFE **Fácil dispensación.** El tubo extensor, permite dispensar el volumen sin la necesidad de volcar la botella.

Llenado del dispensador. Puede rellenarse por el embudo sin riesgo de modificar los ajustes. **Totalmente Autoclavable** La botella dispensadora puede autoclavarse totalmente sin desmontar, a 121 °C durante 20 minutos. **Robustez.** El dispensador puede almacenarse de lado, incluso volcarse, sin riesgo de alterar los ajustes.



Codigo	Volumen ml.	Incrementos ml.	Exactitud %	Precisión %	Volumen de la Botella
AJ-1	0,2-1	0,05	<±1	<0,1	250ml
AJ-2	0,4-2	0,1	<±1	<0,1	250ml
AJ-5	1-5	0,1	<±1	<0,1	500ml
AJ-10	2-10	0,25	<±1	<0,1	1 litro
AJ-30	5-30	1	<±1	<0,1	2 litros

Dispensador-Dosificador “Digital” de Volumen Variable. Modelo “Digitarte-Pro 50”. **Marca Jencons-Comecta.**

Cod: 0182026.

Exactitud: ± 0,2%. Precisión: < 0,1%CV.

Capacidad: 0,01-50ml. Incrementos 0,01ml.

Display digital con lectura continua del volumen dispensado.

Función reset de puesta a cero para múltiples titulaciones.

Volumen acumulable hasta 99,99 ml.

Función de congelación de dato sin afectar el valor visualizado, para la toma de muestras durante la titración.

Auto-desconexión sin pérdida de dato tras 3' de inoperatividad.

Batería de litio de 3.6V con autonomía para 60.000 titulaciones.

Indicador de baja batería.

Calibración vía panel digital apta para todos los requerimientos

GLP / ISO, o diferentes viscosidades. Válvula de seguridad

antigoteo útil frente a una dispensación accidental.

Cabezal giratorio a 360° para una cómoda manipulación.

Pistón en PTFE de suave acción fácilmente desmontable para su

limpieza e integrado en cilindro de vidrio borosilicato y protegido

por una manga en PP transparente, permite la inspección de líquido

antes de su dispensación. Cánula de descarga en FEP y acodada a 90°

para una dispensación segura en matraces de cuello estrecho. Tubo de

aspiración en PTFE. Dispensación libre de burbujas.

Totalmente autoclavable a 121 °C, 2 bar, excepto cabezal digital.

Todas las partes en contacto con el líquido son químicamente

resistentes. No obstante no son aptas para líquidos que no sean compatibles con PTFE, PVDE, FEP,

vidrio borosilicato, cerámica de aluminio o platino-iridio, ni para la dispensación de ácido hidro fluorico,

ni líquidos con partículas sólidas. Fijación directa sobre frascos roscables GL30 y se suministra con 3

adaptadores GL38, GL40 y GL45. Los frascos no están incluidos:

*Frasco en vidrio Borosilicato, 1,4 L, Ambar Absorbente hasta 500nm **Cod: 0262086.**

*Frasco en vidrio Borosilicato, 2,5 L, Ambar Absorbente hasta 500nm **Cod: 0262103.**



Dispensador-Dosificador de Volumen Variable para Botellas (frascos). Marca Nichiryo. Modelos Dispet EX.

Dosificador fácilmente desmontable de las Botellas No incluidas.

Incluyen tres de los más habituales Adaptadores para Botellas. (ver cuadro).

Todas las partes en posible contacto con el Líquido son Químicamente Resistentes.

Tubo de admisión-aspiración ajustable en longitud.

El mecanismo de función antirretorno minimiza la pérdida de líquido o reactivo.

Autoclavable durante 20 minutos a 121°C.



Botellas No Incluidas.

Código	Volumen	Increpent ml	Exactitud %	Precisión V%	Rosca	Adaptadores para Rosca Cuello
DPX-25	0,1-2,5ml	0,05	<± 0,6	< 0,1	GL-32	GL-28,GL-38,GL-45
DPX-50	0,5-5ml	0,1	<± 0,5	< 0,1	GL-32	GL-28,GL-38,GL-45
DPX-100	1-10ml	0,2	<± 0,5	< 0,1	GL-32	GL-28,GL-38,GL-45
DPX-250	2,5-25ml	0,5	<± 0,5	< 0,1	GL-45	GL-28,GL-32,GL-38
DPX-500	5-50ml	1	<± 0,5	< 0,1	GL-45	GL-28,GL-32,GL-38
DPX-1000	10,100ml	2	<± 0,5	< 0,1	GL-45	GL-28,GL-32,GL-38